

# Vasculaire toegang

Veilige perifere intraveneuze katheters

# Safety is not a choice!

## Kies daarom een intraveneuze katheter met een passief veiligheidssysteem van B. Braun


Passieve veiligheidssystemen zijn systemen die automatisch activeren, zonder extra handeling. Bij actieve veiligheidssystemen moet de eindgebruiker eerst een handeling verrichten voordat het veiligheidsmechanisme activeert. Passieve veiligheidssystemen zijn bewezen effectiever in het beschermen tegen prikaccidenten.

### Producten

- Introcan Safety® 3 : de nieuwste generatie intravasculaire katheter, gelijk aan Introcan Safety® met als extra eigenschappen een flow controle septum (je hoeft niet meer af te drukken), grotere vleugels en een aangepast stabilisatieplatform.
- Introcan Safety® : onze intravasculaire katheter zonder bijspuitpunt, met of zonder vleugels.
- Vasofix® Safety : onze intraveneuze katheter met vleugels en een bijspuitpunt.

Website voor experts: [www.bbraunforsafety.com](http://www.bbraunforsafety.com)

Deze website bevat Engelstalige wetenschappelijke documentatie die ingaat op acht onderwerpen binnen het thema 'risico's tijdens intraveneuze toedieningen'. De onderwerpen zijn:

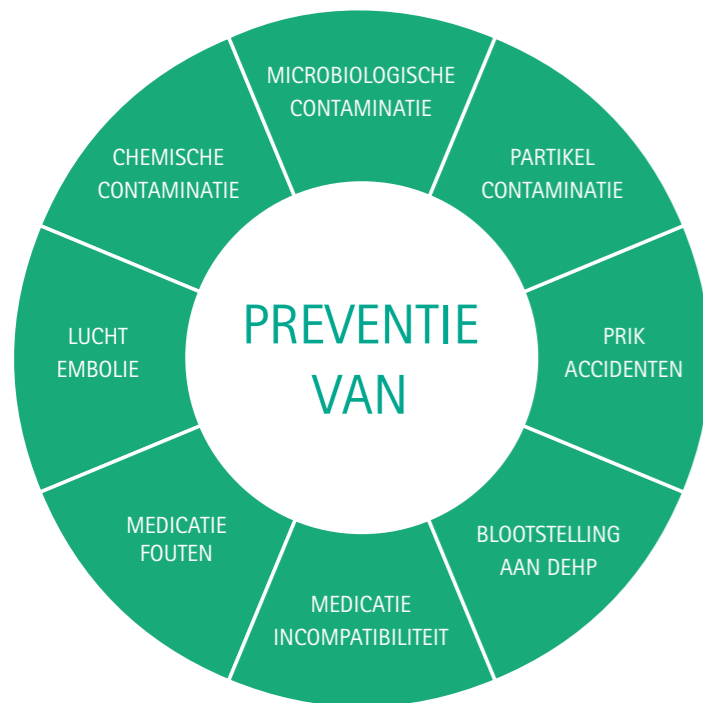

# Intraveneuze katheters



Introcan Safety® 3



Introcan Safety® 3 arterieel



Introcan Safety®



Introcan® Safety Deep Access



Introcan Safety® pediatrie/neonatologie















Vasofix® Safety

### Accessoires





Medibox®


## Eigenschappen intraveneuze katheters


	Introcan Safety® 3	Introcan Safety® 3 arterieel	Introcan Safety®	Vasofix® Safety
 <b>Passief veiligheidssysteem</b> Een veiligheidssysteem dat automatisch activeert. Altijd bescherming tegen prikaccidenten.	■	■	■	■
 <b>Veiligheidsclip</b> Zelfactiverende clip voor betrouwbare bescherming tegen prikaccidenten.	■	■	■	■
 <b>Bloedcontrole septum</b> Het septum voorkomt bloedlekkage van de katheter. Afdrukken van het bloedvat is niet meer nodig.	■	■	—	—
 <b>Arterieel</b> Geschikt voor arterieel gebruik. Voor continue bloeddrukmeting en continue toegang tot arterieel bloed voor monitoring.	—	■	—	—
 <b>Vleugels</b> Vleugels zorgen voor een stabiele ligging van de katheter. Ze voorkomen hiermee irritatie van het bloedvat. Introcan Safety® 3 heeft als enige flexibele vleugels die zich aanpassen aan het huidoppervlak voor optimaal patiëntencomfort.	■	■	■	■
 <b>Dubbele flashback</b> De 1ste flashback van bloed (in de transparante kamer achterop de naald) bevestigt dat de naald in het bloedvat zit. De 2e flashback (tussen naald en katheter) bevestigt dat de katheter in het bloedvat ligt.	■	■	■	■
 <b>Universele slijping van de naald</b> De naalden hebben een drievlakslijping. Daardoor kunt u de naald gebruiken met een aanprikhoek van 15° t/m 45°. Elke intravasculaire katheter van B. Braun heeft dezelfde aanprikhoek.	■	■	■	■
 <b>Geschikt voor pediatrie/neonatologie</b> Kleine, veilige uitvoeringen geschikt voor de allerkleinsten.	■	■	■	■
 <b>Neonatologie</b> Extra lengtematen voor neonatologie. Extra keuze voor deze specifieke doelgroep.	—	—	■	—
 <b>Naaldvrij bijspuitpunt</b> Naaldvrij bijspuitpunt voor een snelle en veilige (bolus)injectie zonder onderbreking van de intraveneuze toediening.	—	—	—	■
 <b>PUR</b> De katheter is vervaardigd uit 100% Polyurethaan, een thermosensibel materiaal. Meer comfort voor de patiënt en minder irritatie van het bloedvat.	■	■	■	■
 <b>FEP</b> De katheter is vervaardigd uit 100% Fluoride Ethylpropyleen.	—	—	■	■

# Productspecificaties intraveneuze katheters


Introcan Safety® 3	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer
	24	¾	19	0.7	22	50	4251127-01
	22	1	25	0.9	35		4251128-01
	20	1	25	1.1	65		4251129-01
	20	1¼	32	1.1	60		4251130-01
	18	1¼	32	1.3	105		4251131-01
	18	1¾	45	1.3	100		4251132-01
	16	1¼	32	1.7	195		4251136-01
	16	2	50	1.7	185		4251133-01
	14	1¼	32	2.2	325		4251135-01
	14	2	50	2.2	310		4251134-01

Introcan Safety® 3	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer
	20	2	50	1.1	22		4251137-01

Introcan Safety®	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Straight (S) of Wing (W)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer	
								FEP	PUR
	22	1	25	0.9	S	35	50	4252519-01	4251628-01
	22	1	25	0.9	W	35		4254511-01	4253540-01
	20	1	25	1.1	S	65		4252543-01	4251652-01
	20	1	25	1.1	W	65		4254546-01	4253574-01
	20	1¼	32	1.1	S	60		4252535-01	4251644-01
	20	1¼	32	1.1	W	60		4254538-01	4253566-01
	20	1¾	45	1.1	S	57		4252527-01	-
	18	1¼	32	1.3	S	105		4252560-01	4251687-01
	18	1¼	32	1.3	W	105		4254562-01	4253604-01
	18	1¾	45	1.3	S	100		4252551-01	4251679-01
	18	1¾	45	1.3	W	100		4254554-01	4253590-01
	16	1¼	32	1.7	S	215		4252586-01	4251709-01
	16	2	50	1.7	S	210		4252578-01	4251695-01
	16	2	50	1.7	W	210		4254570-01	4253612-01
	14	1¼	32	2.2	S	350		4251890-01	-
	14	2	50	2.2	S	345		4252594-01	4251717-01
	14	2	50	2.2	W	345		4254597-01	4253639-01

Introcan® Safety Deep Access	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer	
							Kathetermateriaal	
							FEP	PUR
	24	1¼	32	0.7	17	50	-	4251623-01
	22	2½	64	0.9	24		-	4251622-01
	20	2½	64	1.1	51		-	4251621-01
18	2½	64	1.3	85	-		4251620-01	

Introcan Safety® pediatrie/neonatologie	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Straight (S) of Wing (W)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer	
							Kathetermateriaal		
							FEP	PUR	
	22	1	25	0.9	S	35	50	4252519-01	4251628-01
	22	1	25	0.9	A	35		4254511-01	4253540-01
	24	0.55	14	0.7	S	26		-	4251607-01
	24	0.55	14	0.7	W	26		-	4251614-01
	24	¾	19	0.7	S	22		4252500-01	4251601-01
24	¾	19	0.7	W	22	4254503-01		4253523-01	

Vasofix® Safety	Gauge	Katheterlengte (inch)	Katheterlengte (mm)	Katheter ø (mm)	Flowrate (ml/min)	Aantal per box	Artikelnummer	
							Kathetermateriaal	
							FEP	PUR
	24	¾	19	0.7	22	50	-	42690715-01
	22	1	25	0.9	36		42680915-01	42690985-01
	20	1	25	1.1	65		-	42692175-01
	20	1¼	33	1.1	61		42681135-01	42691105-01
	18	1¼	33	1.3	103		42683345-01	42693305-01
	18	1¾	45	1.3	96		42681305-01	42691365-01
	17	1¾	45	1.5	128		42681565-01	42691525-01
	16	2	50	1.7	196		42681725-01	42691795-01
	14	2	50	2.2	343		42682105-01	42692255-01

## Productspecificaties accessoires

Medibox®	Inhoud	Verpakking	
	Medibox® 0,7 L	10	9193405
	Medibox® 3 L	10	9193413
	Medibox® 5 L	10	9193421

B. Braun Medical B.V. | +31 (0)412 67 24 11 | [customercare.nl@bbraun.com](mailto:customercare.nl@bbraun.com) | [www.bbraun.nl](http://www.bbraun.nl)

De informatie in deze communicatie is strikt vertrouwelijk, kan bedrijfsinformatie omvatten en is alleen bedoeld voor gebruik door de geadresseerde. Het is eigendom van de afzender van deze informatie. Ongeoorloofd gebruik, openbaarmaking of kopiëren van deze communicatie of een deel daarvan is ten strengste verboden en kan onwettig zijn.